

Il manuale d'uso di ogni specifico device verrà consegnato al momento del posizionamento/sostituzione dell'accessorio.

Numeri utili del Servizio di Endoscopia Digestiva

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, tel. **045 601 32 48** o **045 601 47 33**; dopo le ore 16.30, il sabato e la domenica rivolgersi al Pronto Soccorso.

Realizzato dal personale dell'U.O. con il contributo dei pazienti, associazioni, parenti, contributo che deriva anche dagli esiti delle segnalazioni raccolte attraverso la scheda di valutazione della carta dei servizi.




**U.O.C. di GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA**

Direttore: Dr. Paolo Bocus

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Responsabile: Dr. Marco Benini

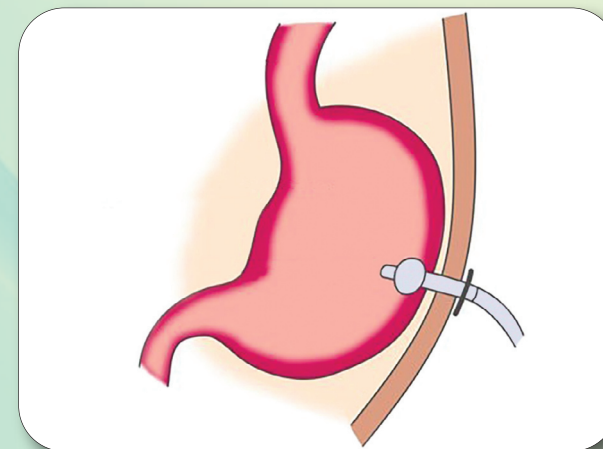

Gestione della P.E.G.

(Gastrostomia Endoscopica Percutanea)

Consigli utili e raccomandazioni

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria


Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

Via Don A. Sempereboni, 5 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) - Tel. 045 601 31 11 - www.sacrocuore.it

Mod. E/36

Rev. 1 del 19/03/2026

Prima di ogni
procedura
è indispensabile
lavarsi le mani
e usare i guanti

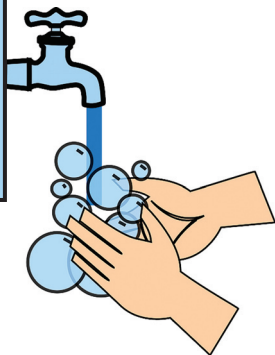


Prima settimana dopo inserimento P.E.G.

- Igiene giornaliera della cute con soluzione salina sterile, togliendo eventuali incrostazioni.
- Se necessario coprire lo stoma con una garza sterile (da apporre sotto il bumper esterno) per assorbire eventuali perdite.
- Ruotare giornalmente la posizione della sonda evitando di tirala, per non irritare la cute circostante e controllare la cute per escludere la presenza di arrossamento, gonfiore o perdita di contenuto gastrico.
- Dopo circa 7-10 giorni, la ferita dovrebbe essere cicatrizzata, allora togliere le medicazioni con garze e lasciare libera la P.E.G.

Accorgimenti

- Igiene della cute intorno alla stomia utilizzando solo sapone neutro e mantenendola asciutta.
- Lavaggio della sonda dopo ogni pasto o altro utilizzo, con acqua ed apposito spazzolino.
- Utilizzare i raccordi appropriati in caso di mal funzionamento o rottura.
- Ruotare la sonda gastrostomica a 360° almeno una volta alla settimana.
- La sonda va sostituita dopo 6-10 mesi in base anche al grado di deterioramento della stessa.

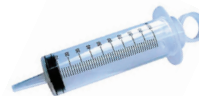

Divieti

- **Non** utilizzare come disinfettanti soluzioni a base di iodio.
- **Non** utilizzare bevande a base di cola per disostruire la sonda.
- **Non** utilizzare dispositivi alternativi o riparare la sonda in caso di rottura.

...e se:

- **Fuoriesce del succo gastrico o del materiale alimentare?**
Controllare l'ancoraggio alla cute della flangia cutanea.
- **La stomia si è allargata?**
Proteggere la cute con pomata protettiva per neutralizzare l'azione irritante del succo acido, in attesa della sostituzione.
- **La P.E.G. si disloca?**
Lo si può capire dal fatto che non solo la sonda non ruota, ma la flangia cutanea ha uno spessore inferiore a quello posizionato.
In caso di rimozione accidentale della sonda gastrostomica, si raccomanda di inserire un catetere di Foley di calibro analogo a quello della sonda e cuffiare il pallone di ancoraggio per impedire la chiusura della fistola. Si procederà quindi a contattare il Servizio di Endoscopia Digestiva per programmare il riposizionamento della sonda gastrostomica.